


Compteur de graines et de semences Détermination du poids de 1000 grains

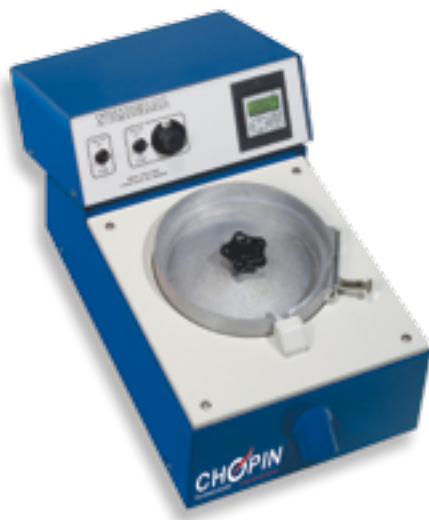

Conforme
aux normes
NF V03-702
et
ISO 520

Simple

*Bol unique adapté à tous types de graines
de 1 à 15 mm*

Rapide

*Détermination du poids de 1000 grains
en moins de 3 minutes*

Précis

*Passage une à une des graines devant
le capteur de mesure*



Le Numigral est un compteur de graines et de semences, idéal pour déterminer le poids de 1000 grains selon la méthode normalisée.

► Principe de mesure

Les graines passent une à une, devant un capteur électronique qui les compte.

L'opérateur sélectionne le nombre souhaité puis place les graines dans le bol. La vibration de celui-ci, réglable en intensité, les achemine le long d'une rampe en spirale. À la sortie du bol, elles chutent une à une devant le capteur.



Les principales applications

- ▷ Évaluation du rendement agronomique, meunier, semoulier et brassicole.
- ▷ Estimation du nombre de graines à semer pour obtenir la bonne densité de semis.
- ▷ Qualification des semences.



► Avantages

CONFORT

Des fonctions simples telles que la présélection possible du nombre de graines à compter et l'arrêt automatique lorsque ce nombre est atteint.

Mise en œuvre aisée :

- > Mettre sous tension
- > Pré-sélectionner le nombre de graines à compter
- > Régler l'intensité de vibration

FIABILITÉ

Les produits de taille supérieure sont éliminés. Le passage groupé de plusieurs graines est évité grâce à la vis de réglage qui ajuste la largeur de sortie de rampe à la taille des graines.

Méthode normalisée NF V03-702 et ISO 520.

POLYVALENCE

Sur le même appareil, vous réalisez le comptage de tout type d'élément de 1 à 15 mm (grains, semences...).



▼ Fonctionnalités



▼ Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V - 50 / 60 Hz
Puissance	50 W
Poids net	25 Kg
Dimensions (mm)	L 260 x P 520 x H 247

Informations commande :

Code : 471103 Désignation : Numigral